

Shuntkatheter

# *Supercath™* Clampcath

*Eine schonende Hämodialysebehandlung  
mit Kunststoffkatheterschlauch*



- *Entwickelt für eine effektive Dialyse und den Erhalt des Gefäßzugangs*
- *Hergestellt in Japan*

CE 0197




MEDIKIT



# Shuntkatheter Supercath™ Clampcath



## Seitliche Löcher

Entwickelt für einen optimalen und gleichmäßigen Blutfluss

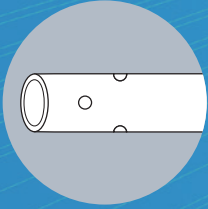

## Einteiliger, durchgehender Kunststoffkatheter

Entwickelt zur Vermeidung von Blutgerinnung und um einen gleichmäßigen Blutfluss zu gewährleisten

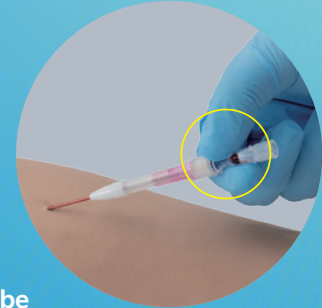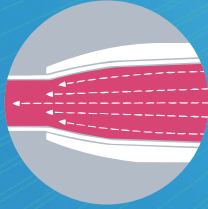


## Nabe

Ermöglicht die Kontrolle des Blutrückflusses




## Äußere Nadel

## Innere Nadel

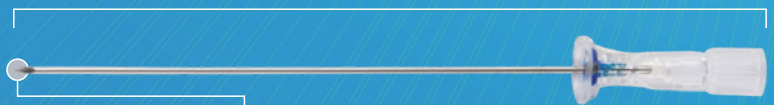


## Kunststoffkatheterschlauch

Entwickelt für eine schonende Einföhrung des Katheterschlauchs

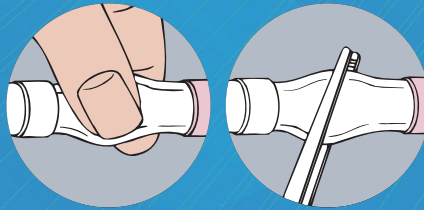

## Klemmschlauch

Der Klemmschlauch kann während des Anschlusses an den Blutschlauch entweder mit einer Klemme oder mit den Fingern abgeklemmt werden

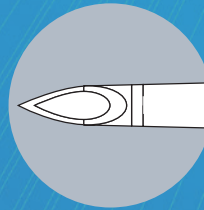

## Nadelspitze

Entwickelt für eine schonende Punktion

Katalognummer	Katheterdurchmesser		Farbcode	Katheterlänge (mm)	Anzahl der seitlichen Löcher	Verpackung
	O.D. (mm) / Gauge	I.D. (mm) / Gauge				
SP502-16 (25)	2.1 / 14G	1.7 / 16G	Hellgrün	25	4	100 St. / Regalbox
SP502-16 (33)	2.1 / 14G	1.7 / 16G		33	4	
SP502-17 (25)	1.9 / 15G	1.5 / 17G	Blaugrau	25	4	1000 St. / Versandkarton (10 Regalboxen)
SP502-17 (33)	1.9 / 15G	1.5 / 17G		33	4	
SP502-18 (25)	1.7 / 16G	1.3 / 18G	Weiß	25	4	

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie das Instrument verwenden.

EOG-Sterilisation (Ethylenoxidgas-Sterilisation)



### Medikit Co., Ltd.

1-13-2, Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0034, Japan  
TEL: +81-3-3839-0492 | FAX: +81-3-3839-0644 | [www.medikit.co.jp/english/](http://www.medikit.co.jp/english/)

### Hersteller:

**Togo Medikit Co., Ltd.**  
17148-6, Aza Kamekawa, Oaza Hichiya,  
Hyuga, Miyazaki 883-0062, Japan

### Vertrieb in Europa durch:

**Medikit Europe GmbH**  
Gerbermühlstraße 7  
60594 Frankfurt am Main, Germany  
TEL: +49-69-8700-660-60 | FAX: +49-69-8700-660-89  
[www.medikit-europe.de](http://www.medikit-europe.de) | [info@medikit-europe.de](mailto:info@medikit-europe.de)

CE 0197

Bevollmächtigter Vertreter in der Europäischen Union:  
Bernas Medical  
55 Rue Stephenson, 75018 Paris, France

2022.03  
20220301J1354-1  
Copyright © 2022 Medikit Co., Ltd.