

Shuntkatheter

Supercath™ NEO

*Passiver Sicherheitsmechanismus mit
vollständig umschlossenem Nadelschutz*

*Eine schonende Hämodialysebehandlung
mit Kunststoffkatheterschlauch*



- *Entwickelt für eine effektive Dialyse
und den Erhalt des Gefäßzugangs*
- *Hergestellt in Japan*

CE 0197




MEDIKIT

Shuntkatheter

Supercath™ NEO


3-Facetten-Schrägschliff

Entwickelt für eine schonende Punktion

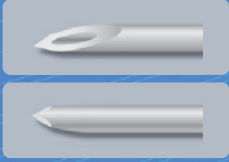



Seitliche Löcher

Entwickelt für einen optimalen und gleichmäßigen Blutfluss

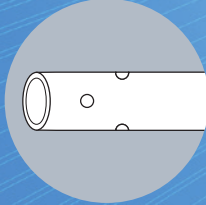

Einteiliger, durchgehender Kunststoffkatheter

Entwickelt zur Vermeidung von Blutgerinnung und um einen gleichmäßigen Blutfluss zu gewährleisten

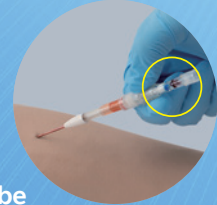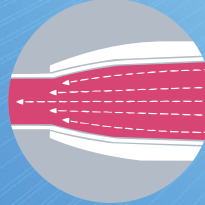

Nabe

Ermöglicht die Kontrolle des Blutrückflusses





Äußere Nadel



Kunststoffkatheterschlauch

Entwickelt für eine schonende Einführung des Katheterschlauchs

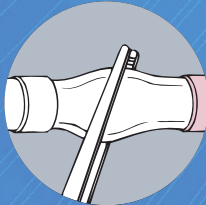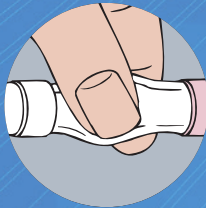

Klemmschlauch

Der Klemmschlauch kann während des Anschlusses an den Blutschlauch entweder mit einer Klemme oder mit den Fingern abgeklemmt werden

Innere Nadel



Sicherheitsclip

Hilft Nadelstichverletzungen und Blutkontakt zu vermeiden



Schutzfolie

Entwickelt zur Minimierung des Risikos von Blutkontakt durch eine kontaminierte innere Nadel

Sicherheitsabdeckung

Katalognummer	Katheterdurchmesser		Farbcode	Katheterlänge (mm)	Anzahl der seitlichen Löcher	Verpackung
	O.D. (mm) / Gauge	I.D. (mm) / Gauge				
SP802-14 (25)	2.1 / 14G	1.7 / 16G	Hellgrün	25	4	1000 St. / Versandkarton (20 Regalboxen)
SP802-14 (33)	2.1 / 14G	1.7 / 16G		33	4	
SP802-15 (25)	1.9 / 15G	1.5 / 17G	Blaugrau	25	4	
SP802-15 (33)	1.9 / 15G	1.5 / 17G		33	4	
SP802-16 (25)	1.7 / 16G	1.3 / 18G	Weiß	25	4	

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie das Instrument verwenden.

Elektronenstrahl-Sterilisation



MEDIKIT

Medikit Co., Ltd.

1-13-2, Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0034, Japan
TEL: +81-3-3839-0492 | FAX: +81-3-3839-0644 | www.medikit.co.jp/english/

Hersteller:

Togo Medikit Co., Ltd.
17148-6, Aza Kamekawa, Oaza Hichiya,
Hyuga, Miyazaki 883-0062, Japan

Vertrieb in Europa durch:

Medikit Europe GmbH
Gerbermühlstraße 7
60594 Frankfurt am Main, Germany
TEL: +49-69-8700-660-60 | FAX: +49-69-8700-660-89
www.medikit-europe.de | info@medikit-europe.de

CE 0197

Bevollmächtigter Vertreter in der Europäischen Union:
Bernas Medical
55 Rue Stephenson, 75018 Paris, France

2022.03
20220301J1355-1
Copyright © 2022 Medikit Co., Ltd.